

halluxsan[®]

Für ein Leben in Bewegung



Hallux Valgus Schiene zur dynamischen Redression mit einstellbarem Federgelenk

Indikationen

- Behandlung ohne Operation bei moderatem Hallux Valgus sowie zur Vorbeugung
- Behandlung vor einer Operation zur Vorbereitung der Weichteilsituation
- Behandlung nach einer Operation zur Stabilisierung des OP-Ergebnisses und ggf. zur Nachkorrektur
- **Kontraindikation:** Bei Weichteilproblemen, Wundheilungsstörungen, Gefäßproblemen (Diabetes) oder Infektionen darf die Schiene nicht getragen werden.

Merkmale

- Therapie in die physiologische Grundstellung der Großzehe
- **Schmerzreduktion**
- Federkraft individuell und werkzeuglos einstellbar
- Individuell einstellbares Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- In vier Farben erhältlich

Optional geeignete Socken erhältlich.

Funktionsweise

Die halluxsan® basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient zur Behandlung des Hallux Valgus. Durch den dynamischen Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum des verkürzten Gewebes und lindert die Schmerzen. **Die stufenlos einstellbare Redressionskraft schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.**

Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Art.-Nr.: links	Art.-Nr.: rechts	Farbe
940A-L	940A-R	grün
940AS-L	940AS-R	schwarz
940AP-L	940AP-R	pink
940AG-L	940AG-R	grau

Optional paarweise erhältlich: geeignete Socken in Schwarz

EU-Schuhgröße	Art.-Nr.: Socke links und rechts
35 - 38	70001
39 - 42	70002
43 - 46	70003



Hallux Valgus Schiene


Dynamische Korrekturschiene mit einstellbarem Federgelenk



Der stufenlos einstellbare Federmechanismus erzeugt eine Korrekturkraft in Richtung der natürlichen Grundstellung der Großzehe.

Durch den stufenlos regulierbaren Dauerzug wird die Dehnung des verkürzten Gewebes angeregt.

Die Schmerzen werden gelindert und eine schädliche Überdehnung vermieden.

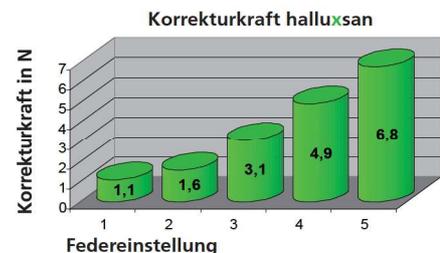

➤ Anwendung

Die Behandlung mit der halluxsan® erfolgt ohne Schuh für mehrere Stunden in den Ruhephasen oder auch in der Nacht.

Beim alltäglichen Gehen ohne Schiene sollten geeignete Schuhe getragen werden. Eine Kombination mit orthopädischen Spreizfüßeinlagen ist angebracht.


Bei konsequenter Durchführung dieses Konzeptes wird eine Korrektur der Zehenschiefstellung und eine Linderung des Ballenschmerzes beobachtet.

➤ Redressionsposition

Die halluxsan® hält den Großzeh in einem Winkel von 10° - 15°.

Die Orthese läßt keine Beugung der Großzehe zu, da die Korrektur in Abrollstellung erfolgen soll.

Die Kombination dieser Position mit dem einstellbaren Korrekturzug ermöglicht eine schmerzfreie Behandlung (Redression).

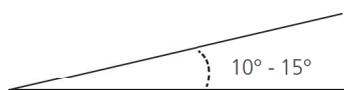

Das Einstellen der Federkraft darf nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt vorgenommen werden.